

特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。


Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。



電動ベッドの機能

背上げ機能

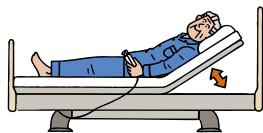


起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能

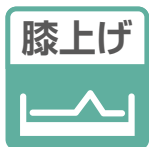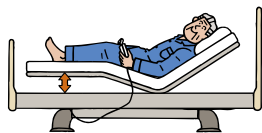

背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能

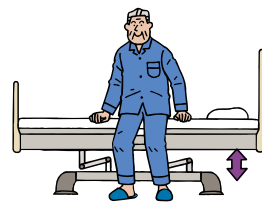

ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。



背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

ラクリアーション



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起き上がり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起き上がり後の姿勢をしっかりと保持します。

らくらくーション




ひとつのボタン操作で、からだかズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

電動ベッドのサイズ


■幅

83cm

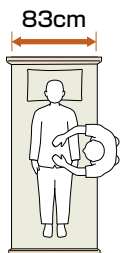


接近しやすく介護がしやすい。

91cm

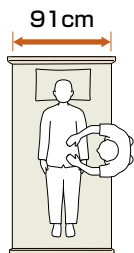

ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。


100cm

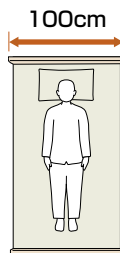

大柄の方でも充分に寝返りができるゆったりとしたスペース。


■長さ

ミニ

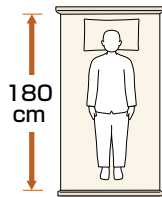


適応身長目安
150cm未満

レギュラー

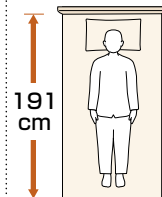

適応身長目安
150cm以上

ロング

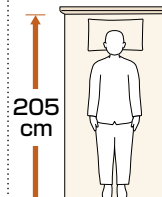

適応身長目安
170cm後半から
※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.18

ベッドの上に敷いて使います。寝返りのためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.26

ベッドの上に差し掛けて使います。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.24


ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

介助バー 参照 P.25

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.13-14

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

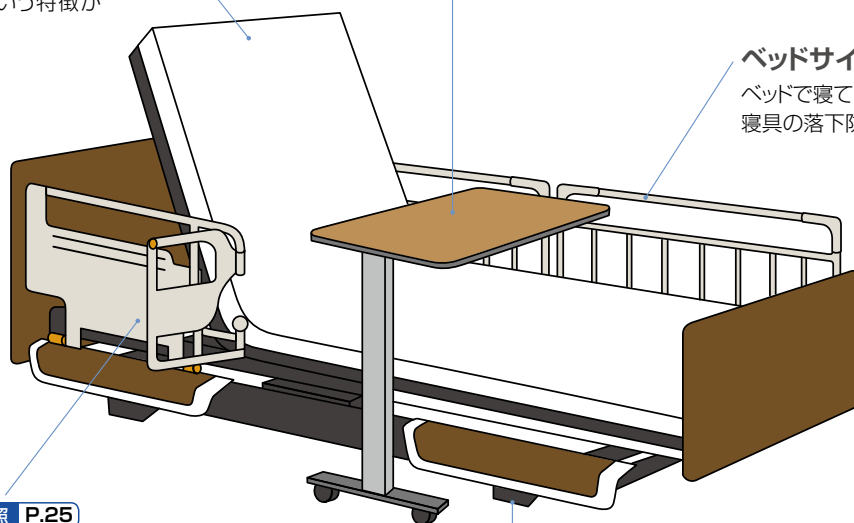

在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。



楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ



ベッドでの姿勢は、
生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの
組み合わせにおいてJIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード ハイタイプ

POINT 1

身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげてから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。



ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こします。



上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

POINT 2

姿勢が崩れにくいから
リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3

足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に足を降ろしやすくなっています。また、ベッドの下のスペースも広いので、立ち上がるときに十分に足を引くことができます。



POINT 4

天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちだった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動かしやすいため、視界も広がりやすくなります。



POINT 5

足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。ベッドの下のスペースが広いので、踏み込んで接近しやすい構造です。



※1モーションは高さ調節ができません。

POINT 6

液晶画面スイッチを全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示が見やすいように白色液晶を使用しています。





セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード




木製ボード
(ハイタイプ)

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイタイプ)																																													
3モーション	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7331</td> <td>707725</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7311</td> <td>707685</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7321</td> <td>707705</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7301</td> <td>707665</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7331	707725	83cm幅	KQ-7311	707685	91cm幅 mini	KQ-7321	707705	83cm幅 mini	KQ-7301	707665	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7332</td> <td>707730</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7312</td> <td>707690</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7322</td> <td>707710</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7302</td> <td>707670</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7332	707730	83cm幅	KQ-7312	707690	91cm幅 mini	KQ-7322	707710	83cm幅 mini	KQ-7302	707670	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7333</td> <td>707735</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7313</td> <td>707695</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7323</td> <td>707715</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7303</td> <td>707675</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7333	707735	83cm幅	KQ-7313	707695	91cm幅 mini	KQ-7323	707715	83cm幅 mini	KQ-7303	707675
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-7331	707725																																													
	83cm幅	KQ-7311	707685																																													
91cm幅 mini	KQ-7321	707705																																														
83cm幅 mini	KQ-7301	707665																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7332	707730																																														
83cm幅	KQ-7312	707690																																														
91cm幅 mini	KQ-7322	707710																																														
83cm幅 mini	KQ-7302	707670																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7333	707735																																														
83cm幅	KQ-7313	707695																																														
91cm幅 mini	KQ-7323	707715																																														
83cm幅 mini	KQ-7303	707675																																														
<p>背上げ 膝上げ</p> <p>高さ調節 背・膝連動</p>	<p>TAISコード 00170-000785</p> <p>レンタル価格 12,000 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 1,200 円/月</p> <p>負担額 (2割) 2,400 円/月</p>	<p>TAISコード 00170-000786</p> <p>レンタル価格 12,000 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 1,200 円/月</p> <p>負担額 (2割) 2,400 円/月</p>	<p>TAISコード 00170-000787</p> <p>レンタル価格 12,000 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 1,200 円/月</p> <p>負担額 (2割) 2,400 円/月</p>																																													
2モーション	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7231</td> <td>707645</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7211</td> <td>707605</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7221</td> <td>707625</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7201</td> <td>707585</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7231	707645	83cm幅	KQ-7211	707605	91cm幅 mini	KQ-7221	707625	83cm幅 mini	KQ-7201	707585	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7232</td> <td>707650</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7212</td> <td>707610</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7222</td> <td>707630</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7202</td> <td>707590</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7232	707650	83cm幅	KQ-7212	707610	91cm幅 mini	KQ-7222	707630	83cm幅 mini	KQ-7202	707590	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7233</td> <td>707655</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7213</td> <td>707615</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7223</td> <td>707635</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7203</td> <td>707595</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7233	707655	83cm幅	KQ-7213	707615	91cm幅 mini	KQ-7223	707635	83cm幅 mini	KQ-7203	707595
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-7231	707645																																													
	83cm幅	KQ-7211	707605																																													
91cm幅 mini	KQ-7221	707625																																														
83cm幅 mini	KQ-7201	707585																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7232	707650																																														
83cm幅	KQ-7212	707610																																														
91cm幅 mini	KQ-7222	707630																																														
83cm幅 mini	KQ-7202	707590																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7233	707655																																														
83cm幅	KQ-7213	707615																																														
91cm幅 mini	KQ-7223	707635																																														
83cm幅 mini	KQ-7203	707595																																														
<p>背上げ 高さ調節</p> <p>背・膝連動</p>	<p>TAISコード 00170-000777</p> <p>レンタル価格 10,000 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 1,000 円/月</p> <p>負担額 (2割) 2,000 円/月</p>	<p>TAISコード 00170-000778</p> <p>レンタル価格 10,000 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 1,000 円/月</p> <p>負担額 (2割) 2,000 円/月</p>	<p>TAISコード 00170-000779</p> <p>レンタル価格 10,000 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 1,000 円/月</p> <p>負担額 (2割) 2,000 円/月</p>																																													
1モーション	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7131</td> <td>707565</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7111</td> <td>707525</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7121</td> <td>707545</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7101</td> <td>707505</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7131	707565	83cm幅	KQ-7111	707525	91cm幅 mini	KQ-7121	707545	83cm幅 mini	KQ-7101	707505	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7132</td> <td>707570</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7112</td> <td>707530</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7122</td> <td>707550</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7102</td> <td>707510</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7132	707570	83cm幅	KQ-7112	707530	91cm幅 mini	KQ-7122	707550	83cm幅 mini	KQ-7102	707510	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-7133</td> <td>707575</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-7113</td> <td>707535</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-7123</td> <td>707555</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-7103</td> <td>707515</td> </tr> </tbody> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7133	707575	83cm幅	KQ-7113	707535	91cm幅 mini	KQ-7123	707555	83cm幅 mini	KQ-7103	707515
	ベッド幅	型式	商品コード																																													
	91cm幅	KQ-7131	707565																																													
	83cm幅	KQ-7111	707525																																													
91cm幅 mini	KQ-7121	707545																																														
83cm幅 mini	KQ-7101	707505																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7132	707570																																														
83cm幅	KQ-7112	707530																																														
91cm幅 mini	KQ-7122	707550																																														
83cm幅 mini	KQ-7102	707510																																														
ベッド幅	型式	商品コード																																														
91cm幅	KQ-7133	707575																																														
83cm幅	KQ-7113	707535																																														
91cm幅 mini	KQ-7123	707555																																														
83cm幅 mini	KQ-7103	707515																																														
<p>背上げ</p>	<p>TAISコード 00170-000769</p> <p>レンタル価格 5,500 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 550 円/月</p> <p>負担額 (2割) 1,100 円/月</p>	<p>TAISコード 00170-000770</p> <p>レンタル価格 5,500 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 550 円/月</p> <p>負担額 (2割) 1,100 円/月</p>	<p>TAISコード 00170-000771</p> <p>レンタル価格 5,500 円/月</p> <p>ご利用 (1割) 550 円/月</p> <p>負担額 (2割) 1,100 円/月</p>																																													

●共通サイズ表

セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)


(レギュラーサイズ・ミニサイズ)

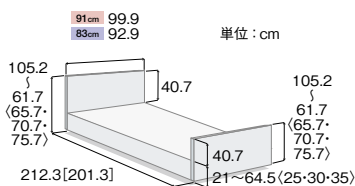

() は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

木製ボード


(レギュラーサイズ・ミニサイズ)

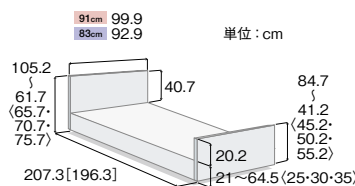

() は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

木製ボード (ハイタイプ)

(レギュラーサイズ・ミニサイズ)

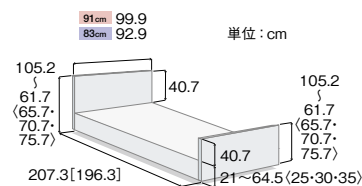

() は1モーションの寸法です
[] はミニサイズの寸法です

楽匠Zシリーズ 専用オプション

アクセスポート

パラマウントベッド

立ち上がりや移乗、室内の移動などさまざまな用途に対応します。目的に合わせて多様な組み合わせが可能です。



ポール手すり1台セット

基本セットと垂直ポールと歩行用手すり1台のセットです。

型式	TAISコード
KQ-P70GF1	00170-000800

レンタル価格	7,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	700 円/月
ご利用 (2割) 負担額	1,400 円/月

基本セット



型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70G	711100	00170-000795

レンタル価格	4,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	400 円/月
ご利用 (2割) 負担額	800 円/月

垂直ポール



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70P	711105	4527799003273

レンタル価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

歩行用手すり



型式	商品コード	JANコード
KQ-P70T	711110	4527799003280

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	200 円/月
ご利用 (2割) 負担額	400 円/月

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS認証取得

レンタル価格	2,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	200 円/月
ご利用 (2割) 負担額	400 円/月

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。

延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

レンタル価格	— 円/月
ご利用 (1割) 負担額	— 円/月
ご利用 (2割) 負担額	— 円/月

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

レンタル価格	500 円/月
ご利用 (1割) 負担額	50 円/月
ご利用 (2割) 負担額	100 円/月

JIS認証取得

ベッドの高さが約3cm高くなります。



※市町村により保険対応外の場合がございますので、ご確認ください。

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

●楽匠Zシリーズ専用

※IVポール+IVポールホルダー

レンタル価格	1,000 円/月
ご利用 (1割) 負担額	100 円/月
ご利用 (2割) 負担額	200 円/月

IVポール

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー


型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス
参照 P.18

介助バー
参照 P.25

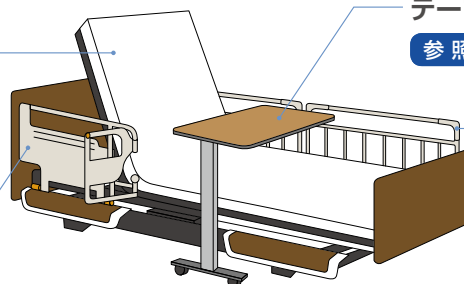

テーブル
参照 P.26

ベッドサイドレール
参照 P.24

※ JIS認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されます。詳しくは、市区町村にご確認ください。



ご本人にも、介護する方にも、安心してお使いいただけるベッド。
それが、楽匠Sシリーズです。
新たに、ゆとりの100cm幅ワイドサイズをラインアップ。



楽匠Sシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて
JIS規格 (JIS T9254:2009) の認証を取得しています。



楽匠Sシリーズ 専用オプション

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード	JIS 認証取得
100cm幅	KQ-P94L	709210	00170-000681	
91cm幅	KQ-P92L	709201	00170-000526	
83cm幅	KQ-P90L	709202	00170-000525	

●楽匠Sシリーズ専用

14cm長くなりませ

延長マットレスが別途、必要となります。

〈100cm〉	〈91・83cm〉
レンタル価格 2,000円/月	レンタル価格 2,000円/月
ご利用負担額 (1割) 200円/月	ご利用負担額 (1割) 200円/月
ご利用負担額 (2割) 400円/月	ご利用負担額 (2割) 400円/月

在庫限定

延長マットレス

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557L	709207	00170-000661
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

〈100cm〉	〈91・83cm〉
レンタル価格 - 円/月	レンタル価格 - 円/月
ご利用負担額 (1割) - 円/月	ご利用負担額 (1割) - 円/月
ご利用負担額 (2割) - 円/月	ご利用負担額 (2割) - 円/月

ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90H	714090	00170-000561

ベッドの高さが6.5cm高くなります。

JIS 認証取得

在庫限定

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560

ベッドの高さは変わりません。

JIS 認証取得

在庫限定

ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル

参照 P.26

ベッドサイドレール

参照 P.24


介助バー

参照 P.25

●共通サイズ表

木製ボード


〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉

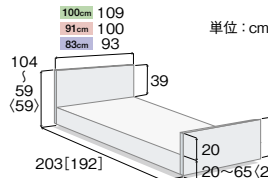

〈 〉は1モーターの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

セーフティーラウンドボード (樹脂製)

〈レギュラーサイズ・ミニサイズ〉

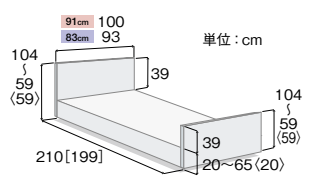

〈 〉は1モーターの寸法です
[]はミニサイズの寸法です

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Sシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

特殊寝台
特殊寝台付属品 床ずれ防止用具
体位変換器
徘徊感知機器 自動排泄処理装置
手すり
歩行補助つえ
歩行器
車いす
車いす付属品
スロープ
移動用リフト



セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)



木製ボード



木製ボード
ワイドサイズ

	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード ワイドサイズ																																				
<p>らくらく モーション</p> <p>背上げ 膝上げ 高さ調節 背・膝連動</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9631</td> <td>705011</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9611</td> <td>705013</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9621</td> <td>705012</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9601</td> <td>705014</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000517</p> <p>レンタル価格 13,000 円/月 ご利用 (1割) 1,300 円/月 負担額 (2割) 2,600 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9631	705011	83cm幅	KQ-9611	705013	91cm幅 mini	KQ-9621	705012	83cm幅 mini	KQ-9601	705014	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9632</td> <td>705001</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9612</td> <td>705003</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9622</td> <td>705002</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9602</td> <td>705004</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000513</p> <p>レンタル価格 13,000 円/月 ご利用 (1割) 1,300 円/月 負担額 (2割) 2,600 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9632	705001	83cm幅	KQ-9612	705003	91cm幅 mini	KQ-9622	705002	83cm幅 mini	KQ-9602	705004	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100cm幅</td> <td>KQ-9652</td> <td>705020</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000679</p> <p>レンタル価格 15,000 円/月 ご利用 (1割) 1,500 円/月 負担額 (2割) 3,000 円/月</p>	ベッド幅	型式	商品コード	100cm幅	KQ-9652	705020
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-9631	705011																																					
83cm幅	KQ-9611	705013																																					
91cm幅 mini	KQ-9621	705012																																					
83cm幅 mini	KQ-9601	705014																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9632	705001																																					
83cm幅	KQ-9612	705003																																					
91cm幅 mini	KQ-9622	705002																																					
83cm幅 mini	KQ-9602	705004																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm幅	KQ-9652	705020																																					
<p>3モーター</p> <p>背上げ 膝上げ 高さ調節</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9331</td> <td>705111</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9311</td> <td>705113</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9321</td> <td>705112</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9301</td> <td>705114</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000518</p> <p>レンタル価格 12,000 円/月 ご利用 (1割) 1,200 円/月 負担額 (2割) 2,400 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9331	705111	83cm幅	KQ-9311	705113	91cm幅 mini	KQ-9321	705112	83cm幅 mini	KQ-9301	705114	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9332</td> <td>705101</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9312</td> <td>705103</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9322</td> <td>705102</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9302</td> <td>705104</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000514</p> <p>レンタル価格 12,000 円/月 ご利用 (1割) 1,200 円/月 負担額 (2割) 2,400 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9332	705101	83cm幅	KQ-9312	705103	91cm幅 mini	KQ-9322	705102	83cm幅 mini	KQ-9302	705104							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-9331	705111																																					
83cm幅	KQ-9311	705113																																					
91cm幅 mini	KQ-9321	705112																																					
83cm幅 mini	KQ-9301	705114																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9332	705101																																					
83cm幅	KQ-9312	705103																																					
91cm幅 mini	KQ-9322	705102																																					
83cm幅 mini	KQ-9302	705104																																					
<p>2モーター</p> <p>背上げ 高さ調節</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9231</td> <td>705211</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9211</td> <td>705213</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9221</td> <td>705212</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9201</td> <td>705214</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000519</p> <p>レンタル価格 10,000 円/月 ご利用 (1割) 1,000 円/月 負担額 (2割) 2,000 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9231	705211	83cm幅	KQ-9211	705213	91cm幅 mini	KQ-9221	705212	83cm幅 mini	KQ-9201	705214	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9232</td> <td>705201</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9212</td> <td>705203</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9222</td> <td>705202</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9202</td> <td>705204</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000515</p> <p>レンタル価格 10,000 円/月 ご利用 (1割) 1,000 円/月 負担額 (2割) 2,000 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9232	705201	83cm幅	KQ-9212	705203	91cm幅 mini	KQ-9222	705202	83cm幅 mini	KQ-9202	705204	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100cm幅</td> <td>KQ-9252</td> <td>705220</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000678</p> <p>レンタル価格 12,000 円/月 ご利用 (1割) 1,200 円/月 負担額 (2割) 2,400 円/月</p>	ベッド幅	型式	商品コード	100cm幅	KQ-9252	705220
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-9231	705211																																					
83cm幅	KQ-9211	705213																																					
91cm幅 mini	KQ-9221	705212																																					
83cm幅 mini	KQ-9201	705214																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9232	705201																																					
83cm幅	KQ-9212	705203																																					
91cm幅 mini	KQ-9222	705202																																					
83cm幅 mini	KQ-9202	705204																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
100cm幅	KQ-9252	705220																																					
<p>1モーター</p> <p>背上げ</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9131</td> <td>705311</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9111</td> <td>705313</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9121</td> <td>705312</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9101</td> <td>705314</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000520</p> <p>レンタル価格 5,500 円/月 ご利用 (1割) 550 円/月 負担額 (2割) 1,100 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9131	705311	83cm幅	KQ-9111	705313	91cm幅 mini	KQ-9121	705312	83cm幅 mini	KQ-9101	705314	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ベッド幅</th> <th>型式</th> <th>商品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>91cm幅</td> <td>KQ-9132</td> <td>705301</td> </tr> <tr> <td>83cm幅</td> <td>KQ-9112</td> <td>705303</td> </tr> <tr> <td>91cm幅 mini</td> <td>KQ-9122</td> <td>705302</td> </tr> <tr> <td>83cm幅 mini</td> <td>KQ-9102</td> <td>705304</td> </tr> </tbody> </table> <p>TAISコード 00170-000516</p> <p>レンタル価格 5,500 円/月 ご利用 (1割) 550 円/月 負担額 (2割) 1,100 円/月 在庫限定</p>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-9132	705301	83cm幅	KQ-9112	705303	91cm幅 mini	KQ-9122	705302	83cm幅 mini	KQ-9102	705304							
	ベッド幅	型式	商品コード																																				
91cm幅	KQ-9131	705311																																					
83cm幅	KQ-9111	705313																																					
91cm幅 mini	KQ-9121	705312																																					
83cm幅 mini	KQ-9101	705314																																					
ベッド幅	型式	商品コード																																					
91cm幅	KQ-9132	705301																																					
83cm幅	KQ-9112	705303																																					
91cm幅 mini	KQ-9122	705302																																					
83cm幅 mini	KQ-9102	705304																																					

特殊寝台

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器 自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

フローアベッド／純シリーズ

フローアベッド (3モーター)

フランスベッド



超低床リクライニングベッド

ご家族と同じ目線でお休みいただけます

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	FLB-03 J 91 J-CP	—	00200-000480



介護の負担を軽減

ボトムの高さを61cmまで調整でき、ベッドから車いすへの移乗時など、介助する方の負担を軽減します。


床上18cmで安全停止!

目視による安全確認をしながらベッドを下げ、挟み込みを予防します。



重量：62kg
背上げ角度：0～75°
脚上げ角度：0～35°

レンタル価格	14,400円/月
ご利用負担額 (1割)	1,440円/月
ご利用負担額 (2割)	2,880円/月

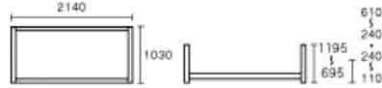

サイドレール

フランスベッド

型式	商品コード	TAISコード	サイズ
SR-100JJ	—	00200-000171	長さ96.5×全高46cm
SR-300JJ	—	00200-000172	長さ76×全高46cm
SR-106JJ	—	00200-000175	長さ96.5×全高46cm

<SR-100JJ・SR-300JJ>
●色：ナチュラル (IV)、ダーク (BR)
<SR-106JJ>
●色：ナチュラル (IV-LO)、ダーク (BR-DO)

SR-100JJ

SR-300JJ

SR-106JJ



<SR-100JJ>

レンタル価格	500円/月
ご利用負担額 (1割)	50円/月
ご利用負担額 (2割)	100円/月

<SR-300JJ>

レンタル価格	500円/月
ご利用負担額 (1割)	50円/月
ご利用負担額 (2割)	100円/月

<SR-106JJ>

レンタル価格	500円/月
ご利用負担額 (1割)	50円/月
ご利用負担額 (2割)	100円/月

2本セット

ベッド用グリップ

フランスベッド

型式	商品コード	TAISコード
GR-510	—	00200-000428

●長さ：117cm ●全高：46cm
●色：ナチュラル (IV)、ダーク (BR)



レンタル価格	1,000円/月
ご利用負担額 (1割)	100円/月
ご利用負担額 (2割)	200円/月

1本

純 1モーター・3モーター


シーホネンス



日々の暮らしにフィットする「和風モダン」なデザイン

レギュラーサイズ

ベッド幅	型式	TAISコード
91cm幅	K-530	00167-000106

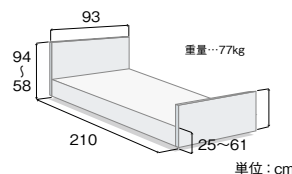

<1モーター>

レンタル価格	5,500円/月
ご利用負担額 (1割)	550円/月
ご利用負担額 (2割)	1,100円/月

<3モーター>

レンタル価格	12,000円/月
ご利用負担額 (1割)	1,200円/月
ご利用負担額 (2割)	2,400円/月

非課税

非課税

単位：cm

特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 徘徊感知機器 自動排泄処理装置 手すり 歩行補助つえ 歩行器 車いす 車いす付属品 スロープ 移動用リフト